


MaxiGo 3VE

(Vibro Edition) массажер для ног

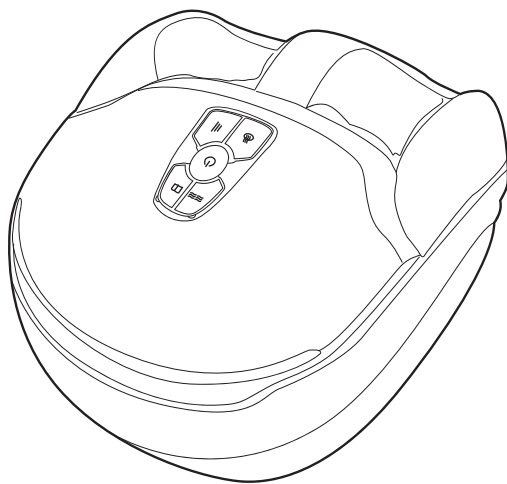

Руководство пользователя

Содержание

Благодарим Вас за выбор нашего массажера для ног. Прочитайте внимательно Инструкцию по эксплуатации перед началом использования. Сохраните инструкцию на весь период эксплуатации массажера. Уделите внимание пункту «Перед использованием».

Меры безопасности	02
Комплектация	05
Функции массажера	06
Перед использованием	07
Порядок эксплуатации	09
Снятие тканевого чехла	10
Иллюстрации использования	10
Хранение и обслуживание	11
Устранение проблем	12
Утилизация	13
Технические характеристики	14

Меры Безопасности

Пожалуйста, ознакомьтесь с мерами безопасности перед использованием массажера. Степень опасности разделяется на оповещения «Предупреждение» и «Внимание».

Важные меры безопасности

- Используйте массажер только как описано в данном руководстве.
- Всегда отключайте массажер от электрической сети сразу после использования или перед очисткой.
- Не используйте массажер, если у Вас чувствительная кожа, нейропатия или плохое кровообращение.
- Не позволяйте детям или людям с психическими отклонениями использовать массажер без надлежащего контроля. Неправильное использование может быть опасно.
- Не используйте массажер под одеялом или любым другим материалом. Чрезмерный нагрев может привести к пожару, поражению электрическим током или травме.
- Не накрывайте массажер, вовремя использования, чтобы избежать электрических неисправностей или повреждений из-за чрезмерно высокой температуры двигателя.
- Немедленно остановите массаж, если чувствуете дискомфорт.
- Никогда не используйте массажер, если он упал, поврежден сетевой шнур или вилка; если он неисправен, или если он упал в воду. Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр, чтобы сделать необходимую проверку и ремонт.
- Не используйте компоненты, которые не были рекомендованы производителем.
- Не вставляйте посторонние предметы в любые отверстия массажера.
- Если Вы хотите отключить питание, пожалуйста, убедитесь, что выключили все функции массажа на панели управления. После этого выньте вилку шнура питания из розетки.
- Пожалуйста, не используйте массажер в качестве медицинского аппарата. Если Вам необходимо профессиональное лечение, обращайтесь к медицинским работникам.

Меры безопасности при эксплуатации

Не используйте массажер во влажных или чрезвычайно пыльных помещениях во избежание возникновения неисправности.

- Не следует использовать массажер при температуре выше 40°C.
- Не используйте массажер на открытом воздухе, вне помещения.
- Избегайте размещения или эксплуатации массажера под прямыми солнечными лучами или рядом с любыми нагревательными приборами, плитами и т.д.

Меры безопасности для пользователя

Убедитесь в том, что массажер расположен в удалении от нагревательных поверхностей. Пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед использованием массажера, если у Вас есть следующие заболевания:

- Болезни сердца, злокачественные опухоли, боли в спине, сколиоз позвоночника, гипертония, остеопороз и т. д.
- Физический дискомфорт, лихорадка, отеки и воспаления, ушибы, аллергия и т.д.
- Не следует использовать массажер, чтобы избежать травмы или физических недомоганий, при тромбозе, тяжелых аневризмах, острых опухолей, всех видов воспаления кожи, инфекционных заболеваниях кожи (в том числе воспаление подкожной клетчатки) и т. д.
- Также, женщинам во время беременности или в менструальный период.

Предупреждение: Нельзя использовать массажер вместе со следующими медицинскими аппаратами:

- 1) При использовании кардиостимулятора или другого имплантируемого медицинского оборудования.
- 2) При использовании любого импланта.
- 3) При использовании электрокардиографа или аналогичного медицинского оборудования.

В противном случае это может привести к неисправности медицинского оборудования, поставив жизнь пользователя в опасность.

Меры по электробезопасности

- Не включайте электропереключатель мокрыми руками.
- Не мочите и не распыляйте воду на электропереключатель массажера.

Важные предупреждения по электробезопасности

- Не дотрагивайтесь до вилки влажными руками. В противном случае Вы можете пострадать от поражения электрическим током или сломать массажер.
- Не тяните за провод при отключении вилки. Пожалуйста, держитесь за корпус вилки.
- Время работы массажера по умолчанию составляет 15 минут, после чего все функции выключаются. Пожалуйста, отключите массажер от электросети сразу после использования.
- Держите шнур вдали от горячей поверхности.
- Не кладите вилку под массажер или какие-либо тяжелые предметы.
- Не наматывайте сетевой шнур вокруг массажера, чтобы избежать поломок, удара электрическим током или пожара.
- Не используйте массажер, если у него поврежден кабель питания или вилка.
- Не используйте массажер, если розетка имеет признаки повреждения.
- Не переносите массажер, взявшись за его шнур питания.
- Если вилка питания повреждена, обратитесь в сервисный центр для необходимого ремонта.


Внимание

- Не засыпайте во время использования массажера.
- Не используйте массажер в состоянии алкогольного опьянения.
- Не вставляйте на массажер и не кладите на него тяжелые предметы.
- Не используйте массажер более 30 минут одновременно.
- Не используйте массажер, если тканевые чехлы изношены.
- Не используйте массажер в течение часа до или после еды.
- При использовании массажера при низкой комнатной температуре, не включайте сразу функцию прогрева. Сначала отрегулируйте температуру до комнатной, и только затем активируйте прогревающую функцию.
- При перемещении массажера из места хранения с низкой температурой в более теплое помещение, на его внутренних компонентах может образоваться конденсат. Оставьте массажер при комнатной температуре в течение трех часов перед использованием.
- Не используйте массажер, если он неисправен или некорректно работает.
- Если во время массажа произошло отключение электричества, отключите вилку от розетки, чтобы избежать поломки массажера при внезапном восстановлении питания.
- Прекратите использование массажера во время грозы.

не включайте сразу функцию прогрева. Сначала отрегулируйте температуру до комнатной, и только затем активируйте прогревающую функцию.

- При перемещении массажера из места хранения с низкой температурой в более теплое помещение, на его внутренних компонентах может образоваться конденсат. Оставьте массажер при комнатной температуре в течение трех часов перед использованием.
- Не используйте массажер, если он неисправен или некорректно работает.
- Если во время массажа произошло отключение электричества, отключите вилку от розетки, чтобы избежать поломки массажера при внезапном восстановлении питания.
- Прекратите использование массажера во время грозы.

Комплектация

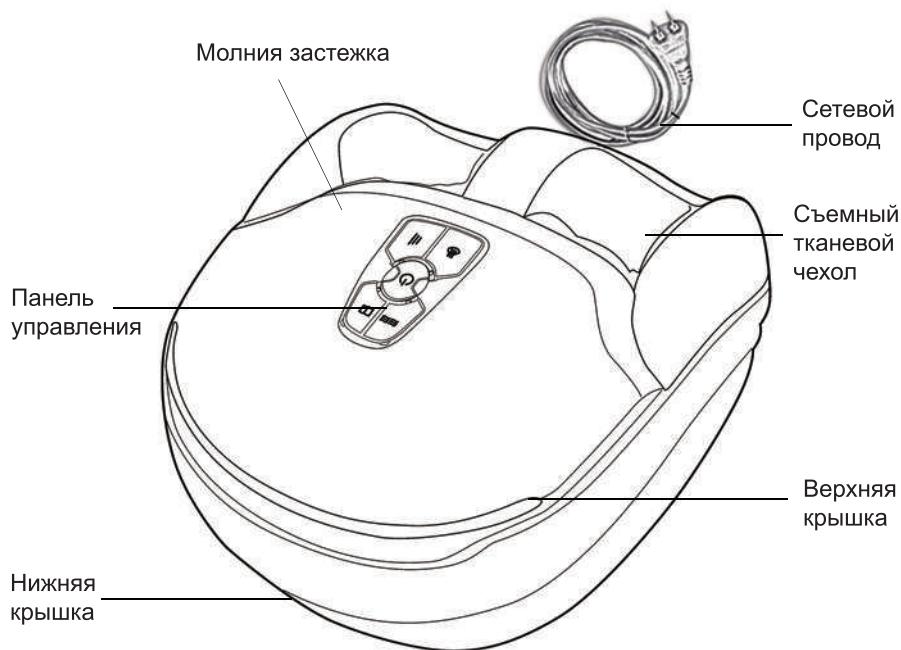

Функции массажера

Инновационный дизайн

Портативный и эргономичный дизайн, легкий вес, удобный для того чтобы насладиться массажем там, где вам удобно и чувствовать себя комфортно.

Специально разработан для ухода за ногами

Комбинирует два ряда разминающих роликов, Шиаци, воздушную компрессию, инфракрасный прогрев и вибрационную терапию. Предоставляет глубокий акупунктурный массаж ног.

Новая идея для улучшения кровообращения

U-образная форма воздушных подушек в комплексе с инфракрасным прогревом, помогает снять боли и дискомфорт. Именно такая форма подушек позволяет массировать не только верхнюю часть стопы, но ахиллесово сухожилие. Вы почувствуете легкость в ногах всего через 2-3 минуты сеанса массажа.

Съемные матерчатые чехлы

Тканевые чехлы для ног можно снимать и стирать.

Безопасность

В процессе массажа, при внезапном отключении электричества, массажер автоматически выпускает воздух, чтобы убрать давление.

Функционал

Воздушные подушки для стоп и пяток имитируют акупунктурный надавливающий массаж, помогая снять отечность ног.


360° воздушные подушки с обертывающим эффектом

Два комплекта воздушных подушек, установленных в области пяток и стоп, создают обертывающий эффект. Данная компрессия эффективно сочетается с разминающим и вибрационным воздействием, что дает более глубокий эффект массажа и оздоровления ваших ног.

Перед Использованием

Пожалуйста, храните и используйте массажер в сухом месте и не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей.

Поместите массажер на подстилку или коврик, чтобы уменьшить шум и вибрации от его работы.

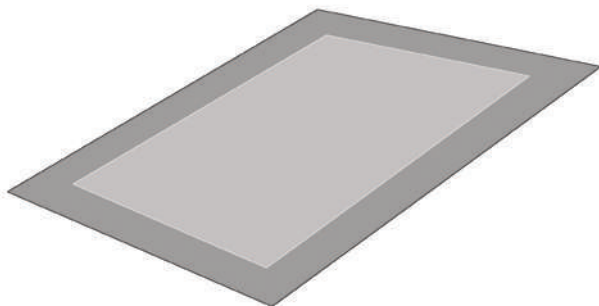

Кнопки панели управления

1. Вибрация: Кнопка включает и выключает функцию вибрации. Она горит, когда вибрация включена и гаснет, когда выключена. Для перехода в ручной режим, нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд. После этого, каждое нажатие кнопки последовательно включает вибрацию в 3 режимах: 1 режим синий, 2 режим красный, 3 режим зеленый. Четвертое нажатие выключает функцию вибрации.

2. Авто: 3 автоматических режима массажа: Вставьте ноги в массажер перед нажатием этой кнопки. Каждое нажатие кнопки переключает 3 режима: 1 режим синий, 2 режим красный, 3 режим зеленый.


3. Прогрев: Нажмите кнопку для включения прогрева. При этом кнопка загорится красным светом. Нажмите кнопку еще раз для выключения прогрева.

4. Вкл/Выкл: Кнопка включает и выключает массаж ног. В режиме ожидания кнопка мигает красным светом. Нажмите кнопку для начала массажа. Загорится зеленый свет и включится 1 режим вибрации, 1 авто режим и функция прогрева. Нажмите кнопку еще раз, для выключения массажа.

5. Сила массажа: Кнопка переключает 3 уровня интенсивности компрессии. Зеленый - низкий уровень, синий - средний уровень, красный - высокий уровень. При отключении массажа свет кнопки гаснет.

Примечание:

- 1) При включении функции вибрации кнопка "Сила массажа" регулирует три уровня интенсивности вибрации.
- 2) В автоматическом режиме массажа, кнопка "Сила массажа" регулирует интенсивность воздушной компрессии.

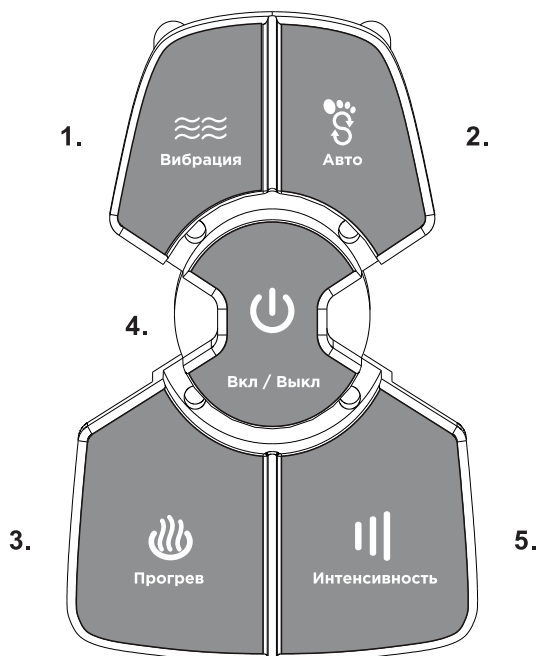


Порядок Эксплуатации

Пожалуйста, убедитесь, что поверхность и состояние сетевого провода в порядке.

Внимание! Не вставляйте и не вынимайте сетевую вилку мокрыми руками.

Питание массажера осуществляется только от сети переменного тока DC 110 В - 240 В, Частотой 50 / 60 Гц. Убедитесь, что напряжение Вашей сети соответствует данным параметрам спецификации.

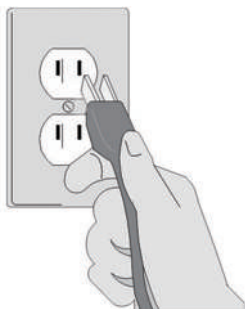

1. Подключите адаптер переменного тока к розетке.
2. При подключении питания, раздастся звуковой сигнал и индикатор кнопки питания на панели управления начнет моргать красным светом. Это означает что массажер находится в режиме ожидания.
3. Нажмите кнопку Вкл/Выкл, чтобы начать выполнение массажа ног.
4. Выберите другую программу, чтобы продолжить сеанс массажа.

Снятие Чехла

Снятие тканевого чехла

1. Расстегните молнию.
2. Снимите тканевой чехол.



Молния

Установка тканевого чехла

1. Вставьте тканевой чехол в нишу для ног.
2. Закрепите язычок молнии в замке.
3. Застегните молнию.



Замок

Иллюстрации Использования



Обслуживание и Хранение

Хранение

- Пожалуйста, уберите массажер в картонную коробку, и храните в безопасном, сухом, хорошо вентилируемом и темном месте.
- Не скручивайте сетевой провод вокруг массажера.
- Не вешайте массажер за сетевой провод и не держитесь за провод при перемещении массажера.
- Избегайте соприкосновения поверхности массажера с острыми предметами.
- Пожалуйста, не храните массажер под прямыми солнечными лучами или в местах с повышенной температурой.
- Храните массажер в чистом и сухом помещении.
- Когда массажер длительное время не используется, пожалуйста, накройте его чехлом от пыли.

Очистка массажера

- Перед очисткой убедитесь, что шнур питания отключен от электрической розетки и что массажер полностью остыл.
- Используйте влажную чистую ткань для очистки массажера. Убедитесь, что массажер полностью высох перед повторным использованием.
- Съёмные тканевые чехлы можно стирать.

Предупреждение!

Избегайте использования бензина, растворителя, спирто-содержащих средств или других агрессивных моющих средств для очистки массажера.

Устранение проблем

Проблема	Возможная причина	Решение
Массажер не работает	Массажер не подключен к питанию правильно.	Плотно вставьте вилку в розетку. Проверьте соответствие напряжения питания массажера напряжению питания местной электросети.
	Не включен переключатель питания.	Включите переключатель питания.
	Вы использовали массажер без перерыва в течение 40 минут из-за чего сработала защита от перегрева.	Отключите массажер от сети и дайте ему остыть в течение 60 минут, после чего Вы можете включить его снова.
Массажер выключился	Пропало питание.	Проверьте наличие питания.
	Закончилось время сеанса 15 минут.	Включите массажер заново.
	Массажер работал без перерыва длительное время и перегрелся.	Отключите массажер от сети и дайте ему остыть, после чего Вы можете включить его снова.


Если произошло нарушение работы массажера, не связанное с вышеуказанными причинами, прекратите использование массажера для ног и свяжитесь с сервисным центром для диагностики и ремонта.

Утилизация

Данная маркировка указывает на то, что поколачивающий массажер, не должен быть утилизирован вместе с другими бытовыми отходами.

Для того, чтобы предотвратить нанесения ущерба окружающей среде или здоровью людей. Следует произвести утилизацию в виде повторного использования (вторсырье).

За дополнительной информацией по утилизации обращайтесь в точку продажи.

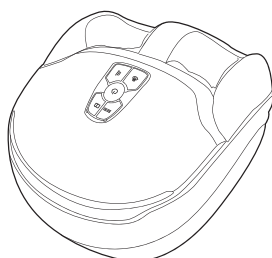

Технологические параметры

Наименование: Массажер для ног
Модель: MaxiGo 3VE
Напряжение: DC100 ~ 240В, 50 / 60 Гц
Мощность: 65 Вт

Производитель: NINGBO INNOHUT IMPORT AND EXPORT CO., LTD.
3/F, No.226 Xianghe West Road, Yinzhou District, Ningbo, Zhejiang, China 315105
Дата производства: смотреть на массажере
Сделано в Китае

www.ergonova.ru
info@ergonova.ru

Полный перечень представительств: <http://ergonova.ru/about/stores/> Все авторские права на тексты и изображения принадлежат Ergonova GmbH и не могут использоваться иначе только с согласия правообладателя.

Авторское право © 2012г.

Ergonova GmbH

Все права защищены

