



# MÉRIDIEN

## Массажное кресло Fiji

## Руководство пользователя



Внимательно ознакомьтесь с ТЕХНИКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ перед использованием кресла.

# Массажное кресло

## Fiji

### Знакомство с функциями кресла

1. Данное массажное кресло оснащено запатентованным механизмом ритмического массажа, что делает его уникальным устройством для физиотерапии.
2. Функция ритмического массажа имеет три уровня регулировки: высокий, средний и низкий. Ритмическая функция массажного кресла оказывает воздействие различные части тела, а благодаря трем уровням регулирования можно подобрать подходящую мощность для каждого пациента.
3. Сидение имеет три уровня регулировки.
4. Эргономичный дизайн механизма спинки позволяет одновременно осуществлять массаж шеи, плеч, спины и поясницы. Сильные, но одновременно мягкие массажные движения достигают акупунктурных точек для быстрого расслабления натруженных мышц.
5. Трехмерный массаж шеи с помощью шести массажных роликов способствует разогреванию, снятию напряжения и облегчению усталости, боли и прочих неприятных симптомов в шее и плечах.
6. Компактная спинка оснащена расширенным многофункциональным механизмом растирания и массажа спины, что позволяет производить глубокий массаж шеи, спины и поясницы.
7. Массажное кресло имеет три программы массажа: прямой разминающий массаж, обратный разминающий массаж, и двусторонний разминающий массаж. Они позволяют производить прямой и обратный массаж тела, повысить локальную температуру отдельных частей тела, активизировать кровообращение и отток лимфы.
8. Кресло оснащено USB-портом для зарядки мобильных устройств, который можно использовать во время массажа, что невероятно удобно. Кресло также оснащено карманом для мобильного телефона.
9. Когда кресло не используется для массажа, на него можно положить большие мягкие подушки для поддержания поясницы и спины, чтобы не чувствовать давления массажных головок. На нем комфортно сидеть, как на диване.
10. Кресло небольшое и легкое, может быть обшито дышащей тканью различных цветов, что позволит ему отлично вписаться в любой интерьер.

1. Благодарим за выбор нашего массажного кресла Fiji.
2. Внимательно ознакомьтесь с данным руководством перед использованием массажного кресла.
3. Сохраните данное руководство для будущего использования.
4. Внимательно ознакомьтесь с разделом ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.

Примечание: Мы сохраняем за собой право на изменение конструкции кресла. Она подлежит изменению без предварительного уведомления. Изображения в данном руководстве приведены исключительно для справки. Ориентируйтесь на свое устройство.

## Содержание

Подготовка	Техника безопасности.....	1
	Детали внешней конструкции.....	5
	Детали внутренней конструкции.....	6
	Разнесенный вид.....	7
	Список деталей.....	8
Установка	Установка.....	9
Массаж	Настройка перед массажем.....	11
	Ручное управление.....	12
	Инструкция по эксплуатации и изображение функций.....	13
Обслуживание	Очистка и обслуживание.....	14
Прочее	Руководство по неисправностям.....	15
	Технические данные.....	16



Сохраните данное руководство для будущего использования.

# 1

## Техника безопасности

- Внимательно прочитайте данное руководство для обеспечения правильной установки и эксплуатации массажного кресла.
- Раздел «Техника безопасности» содержит «Меры предосторожности» и «Предупреждения».

Как «Меры предосторожности», так и «Предупреждения» являются важными требованиями техники безопасности. Рекомендуем обратить на них внимание.



	Меры предосторожности	Данный значок указывает на меры предосторожности во избежание летального исхода или получения травм.
	Предупреждения	Данный значок указывает на предупреждения о возможном получении травм и повреждении собственности.

### Значение символов

Подготовка

	Данный символ указывает на запрещенные действия.		Данный символ указывает на запрет по самостоятельной разборке.
	Данный символ указывает на инструкции по эксплуатации, которые необходимо соблюдать.		Данный символ указывает на правильное подключение кабелей.

- Следующие инструкции необходимо сохранить для использования в будущем.

 <b>Меры предосторожности</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Пациенты с остеопорозом, переломом позвонков; или при состояниях, вызывающих острую боль.</li> <li>• Люди с заболеваниями сердца, включая кардиостимуляторы и прочие электронные устройства в теле.</li> <li>• Пациенты с онкологией.</li> <li>• Люди с перцептивными нарушениями, вызванными расстройством периферического кровообращения, например, диабетом.</li> <li>• Люди с проблемами и искривлениями позвоночника.</li> <li>• Люди с выпадением межпозвоночного диска.</li> <li>• Беременные и только что родившие женщины, а также люди с проблемами здоровья.</li> <li>• Люди с повреждениями кожи: тромбозом, острым варикозом и различными воспалениями кожи.</li> <li>• Люди, не чувствующие высоких и низких температур.</li> <li>• Пациенты с высокой температурой (острые воспаления: ожоги, обморожения, перепады кровяного давления, слабость).</li> <li>• Люди старше 80 лет.</li> <li>• Людям с нарушениями сознания, страдающим психическими заболеваниями или неспособным управлять устройством, запрещено его использовать!</li> <li>• Люди, которые не могут о себе позаботиться, дети и люди в состоянии алкогольного опьянения.</li> <li>• Не используйте кресло, будучи мокрым.</li> <li>• Не засыпайте в кресле.</li> </ul> <p>Людям с вышеперечисленными симптомами не стоит использовать массажное кресло, либо использовать его под наблюдением врача. Кресло используется на усмотрение пользователя.</p>	<p>Люди, которым нельзя использовать кресло.</p> <p>Риск несчастных случаев или дискомфорта.</p>







## Меры предосторожности

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Перед использованием убедитесь, что между различными элементами кресла нет посторонних предметов.</li> <li>• Перед использованием уберите любые предметы, которые могут упасть на вас, во избежание повреждений и травм, вызванных падением предметов под сидение из-за ритмичных вибраций.</li> <li>• Если вы испытываете дискомфорт во время использования, прекратите работу кресла и проконсультируйтесь с врачом</li> <li>• Во время массажа в районе головы обратите особое внимание на движение роликов, голову не стоит массировать слишком сильно и слишком долго.</li> <li>• Будьте внимательны во время массажа в области вокруг шеи.</li> <li>• Не делайте интенсивный массаж шеи.</li> <li>• Не массируйте живот и колени.</li> <li>• Если вы хотите покинуть массажное кресло во время массажа, необходимо отключить его перед тем, как встать.</li> <li>• Не используйте кресло с другими инструментами.</li> <li>• Детям и домашним животным не разрешается играть на кресле, особенно во время массажа. Также запрещается стоять или сидеть на спинке и подлокотниках.</li> <li>• Людям, испытывающим сложности при передвижении или не способным выражать свои мысли и эмоции, необходимо обязательное постоянное наблюдение во время массажа.</li> <li>• Перед перемещением кресла необходимо вернуть спинку и подножку в изначальное положение.</li> </ul>	<p>Несчастные случаи/травмы</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Защитный кожух спинки должен быть чистым. Не проливайте воду и другие жидкости на выход питания во избежание удара током.</li> <li>• Вставьте вилку шнура питания кресла в подходящую розетку. Убедитесь, что вилка полностью вошла в розетку, с целью уменьшения риска короткого замыкания и возгорания.</li> <li>• Отключите питание, когда кресло не используется. Остановите массаж и установите переключатель в положение ВЫКЛ перед отключением</li> </ul>	<p>Возгорание и удар током</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Запрещается сворачивать массажные подушки кресла для хранения.</li> <li>• Запрещается длительное подключение кресла на холостом ходу.</li> <li>• Запрещается оставлять подключенное в сеть массажное кресло без наблюдения.</li> </ul>	<p>Несчастные случаи</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Шнур питания, вилку и розетку нельзя использовать в поломанном состоянии или с ослабленными контактами.</li> <li>• Во избежание возгорания, удара током или прочих поломок рекомендуется использовать массажное кресло только в сети с номинальным напряжением.</li> <li>• Запрещается использовать переломанный, отремонтированный, связанный в узел, перекрученный или зажатый тяжелым предметом шнур питания.</li> <li>• Не используйте устройство с поврежденным шнуром или вилкой, если оно не работает.</li> <li>• Не оставляйте шнур питания у нагревательных приборов.</li> </ul>	<p>Возгорание и удар током</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Если кресло неисправно или сломано, облито водой или упало в воду, обратитесь к профессионалу для ремонта или отправьте кресло сервисному агенту. Самостоятельное изменение, разборка или обслуживание запрещены!</li> <li>• Если шнур питания или вилка повреждены, не заменяйте их самостоятельно, свяжитесь с дилером для замены.</li> <li>• Во избежание удара током или травм, не открывайте и не разбирайте какие-либо элементы кресла. Кресло не имеет элементов, которые должны обслуживаться пользователем.</li> <li>• Проверьте целостность кожаной или тканевой обивки кресла. Если имеются повреждения, даже небольшие, прекратите использовать кресло, отключите питание и отремонтируйте обивку</li> </ul>	<p>Разборка и обслуживание</p>



## Предупреждения

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Используйте кресло на плоской и ровной поверхности.</li> </ul>	Во избежание случайного падения
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Максимальное рекомендуемое время работы – 20 минут. По 5 минут в каждом положении, начиная с легкого поэтапного массажа. Длительный массаж одного места может спровоцировать дискомфорт.</li> </ul>	Слишком продолжительный массаж вреден для тела
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Во избежание травм тщательно осмотрите кресло перед посадкой, чтобы убедиться, что массажные головки находятся в правильном положении.</li> </ul>	Во избежание случайных травм
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь, что переключатель установлен в положение «ВЫКЛ», прежде чем подключить кресло в розетку.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Выключите все элементы управления, прежде чем отключать вилку от розетки.</li> </ul>	Во избежание несчастных случаев при включении
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь, что вилка полностью вставлена в розетку.</li> </ul>	С целью снижения риска удара током и возгорания
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте, не поврежден ли провод, нет ли на нем воды или загрязнений.</li> <li>Правильно установите заземляющий провод. Вилка должна быть подключена в розетку с контактом заземления, его можно согнуть или отрезать.</li> </ul>	Во избежание удара током при протечке или поломке
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Подготовка</div> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Не давите руками и не наступайте на массажные головки.</li> <li>Не кладите руки между работающими массажными головками.</li> <li>Не кладите руки или ноги в промежутки между механическими элементами.</li> <li>Не роняйте и не вставляйте посторонние предметы в отверстия массажного кресла.</li> <li>Не становитесь, не садитесь и не кладите ничего на спинку, подлокотники и подножку.</li> <li>Не перемещайте кресло во время его работы.</li> <li>Не становитесь на кресло во время его работы.</li> <li>Не отключайте шнур питания и переключатель во время работы массажного кресла.</li> <li>Не кладите руки или голову между подножкой и нижней частью кресла.</li> <li>Не используйте массажное кресло с украшениями в волосах.</li> <li>Не кладите твердые предметы в карманы во время массажа ягодиц и бедер.</li> <li>Не садитесь и не давите на спинку, когда она откинута.</li> <li>Не используйте кресло без одежды или в тонкой одежде. Тонкая одежда может обеспечить лучший эффект от массажа, однако, она также может вызвать раздражение на коже или криогенные ожоги.</li> <li>Не используйте массажное кресло в свободной одежде и ювелирных украшениях.</li> <li>Собирайте длинные волосы при использовании кресла.</li> </ul>	Во избежание несчастных случаев или травм
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Не подвергайте кресло воздействию высоких температур, влаги, острых предметов, а также агрессивных, легковоспламеняющихся и взрывоопасных сред.</li> <li>Запрещено использование на массажном кресле электрического одеяла и прочих нагреваемых устройств.</li> <li>Не устанавливайте кресло у духовых шкафов или других нагревательных приборов.</li> <li>Не подвергайте кресло воздействию прямых солнечных лучей или высоких температур.</li> <li>Не устанавливайте кресло в запыленных или загазованных помещениях.</li> <li>Не устанавливайте кресло в небольших помещениях, а также плохо проветриваемых помещениях</li> <li>Не используйте кресло на улице</li> </ul>	Во избежание выгорания и обесцвечивания обивки, а также затвердения и износа пластиковых частей

 <b>Предупреждения</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Не используйте и не храните кресло во влажном помещении. Например, у бассейна или в ванной комнате.</li> <li>Кресло и пульт дистанционного управления постоянно должны быть сухими.</li> <li>Не используйте кресло, будучи мокрым.</li> </ul>	Во избежание протечки или удара током
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь, что провод заземления установлен правильно (некорректная установка может привести к удару током. Если вы не знаете, как сделать это правильно, обратитесь к профессиональному электрику)</li> <li>Не используйте переходники для вилок (если поставляемая в комплект вилка не подходит к вашей розетке, не заменяйте вилку самостоятельно, а обратитесь к профессиональному электрику для установки подходящей розетки)</li> </ul>	Во избежание удара током
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Отключите питание перед очисткой кресла</li> <li>Отключите питание после использования кресла</li> <li>Отключите питание при поломках</li> </ul>	Во избежание удара током и возгорания
	<ul style="list-style-type: none"> <li>При отключении кресла из розетки держитесь за вилку, но не тяните за шнур питания</li> <li>После массажа отключите питание и достаньте вилку из розетки</li> </ul>	Во избежание несчастных случаев
	<ul style="list-style-type: none"> <li>При отключении электричества немедленно отключите питание кресла</li> </ul>	Во избежание повреждения при повторном включении электричества


Подготовка


### Инструкция по заземлению

- Кресло оборудовано шнуром питания с заземляющим проводником. Вилку необходимо вставить в соответствующую розетку, установленную надлежащим образом и подходящую по формату к вилке.


### Замена предохранителя

- Если перегорел предохранитель, отключите тренажер и достаньте вилку из розетки. Откройте крышку, закрывающую предохранитель, находящийся в блоке выключателя. Используйте предохранитель такого же размера для замены перегоревшего, а затем закройте крышку. Вы также можете обратиться к электрику для замены предохранителя.

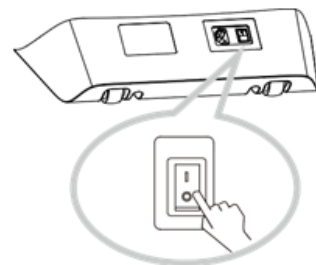


 <p><b>Провод заземления не должен находиться в следующих местах</b></p>	<p>Газовые трубы: может привести к взрыву или возгоранию.                  Телефонный провод и громоотвод: может привести к удару током и возгоранию во время грозы.                  Водопроводные трубы: провод заземления бесполезен в пластике.</p>
---	---

## Внешняя конструкция

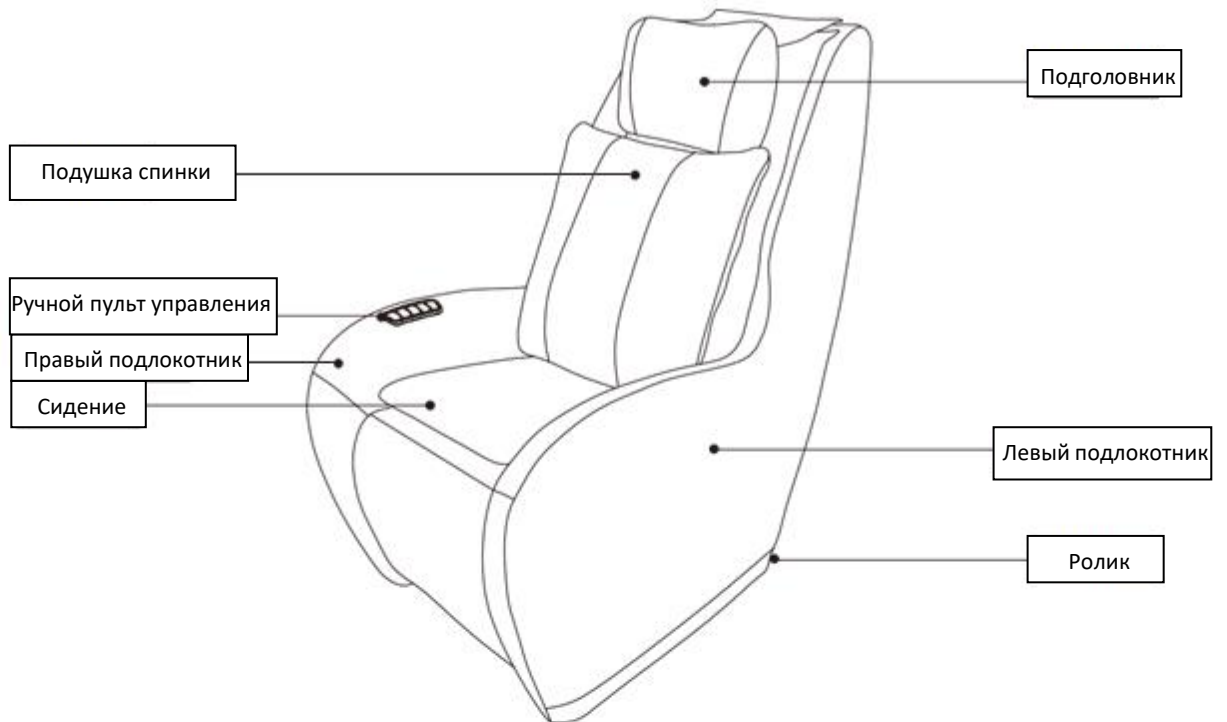


## Подготовка

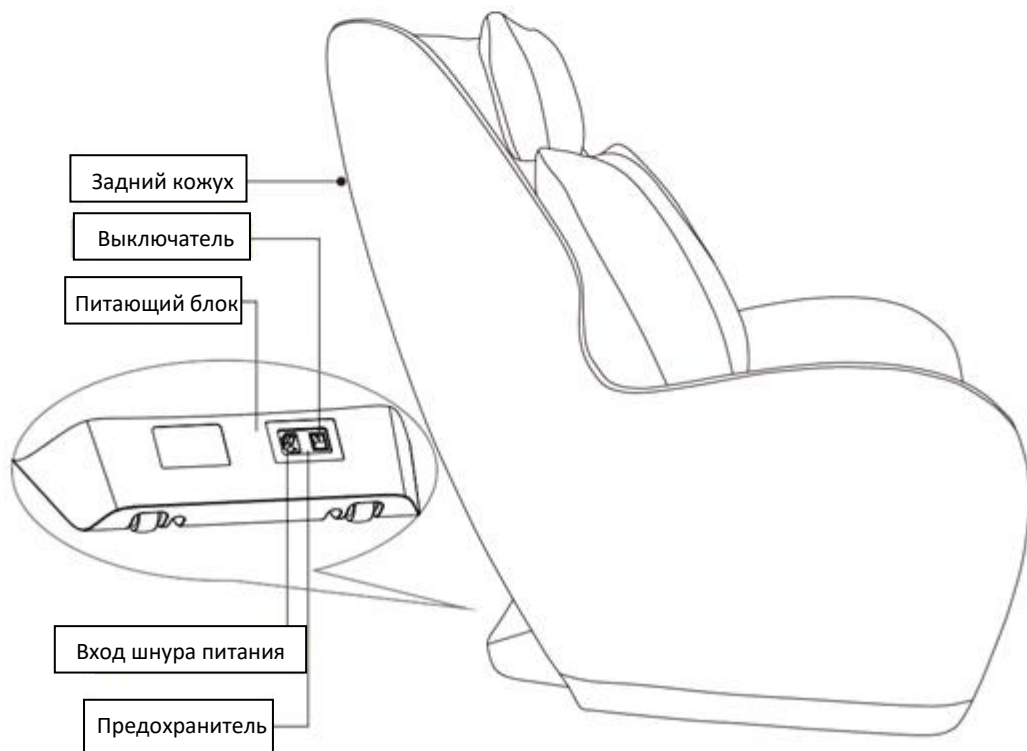




Внутренняя конструкция

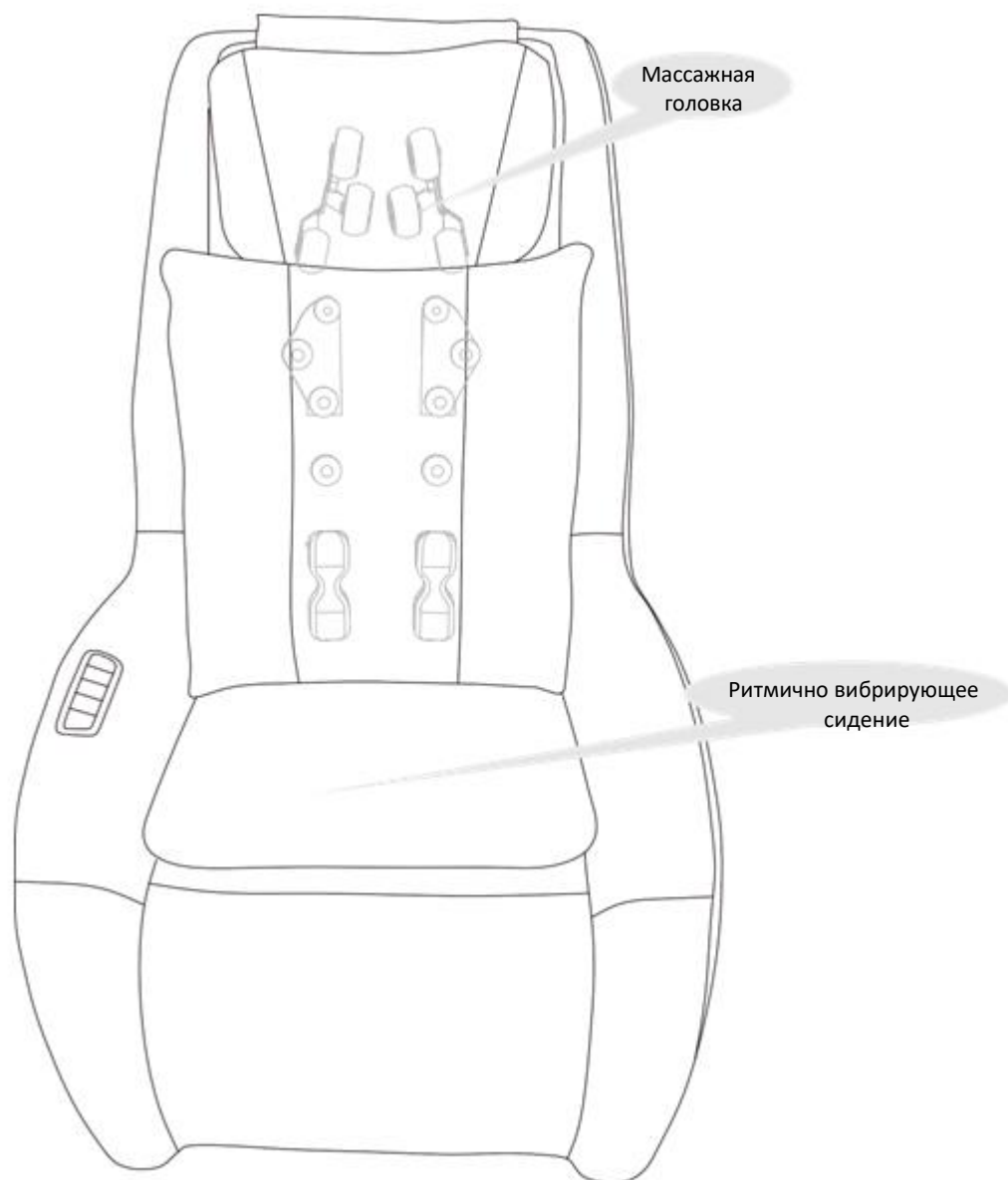

Подготовка

## Разнесенный вид

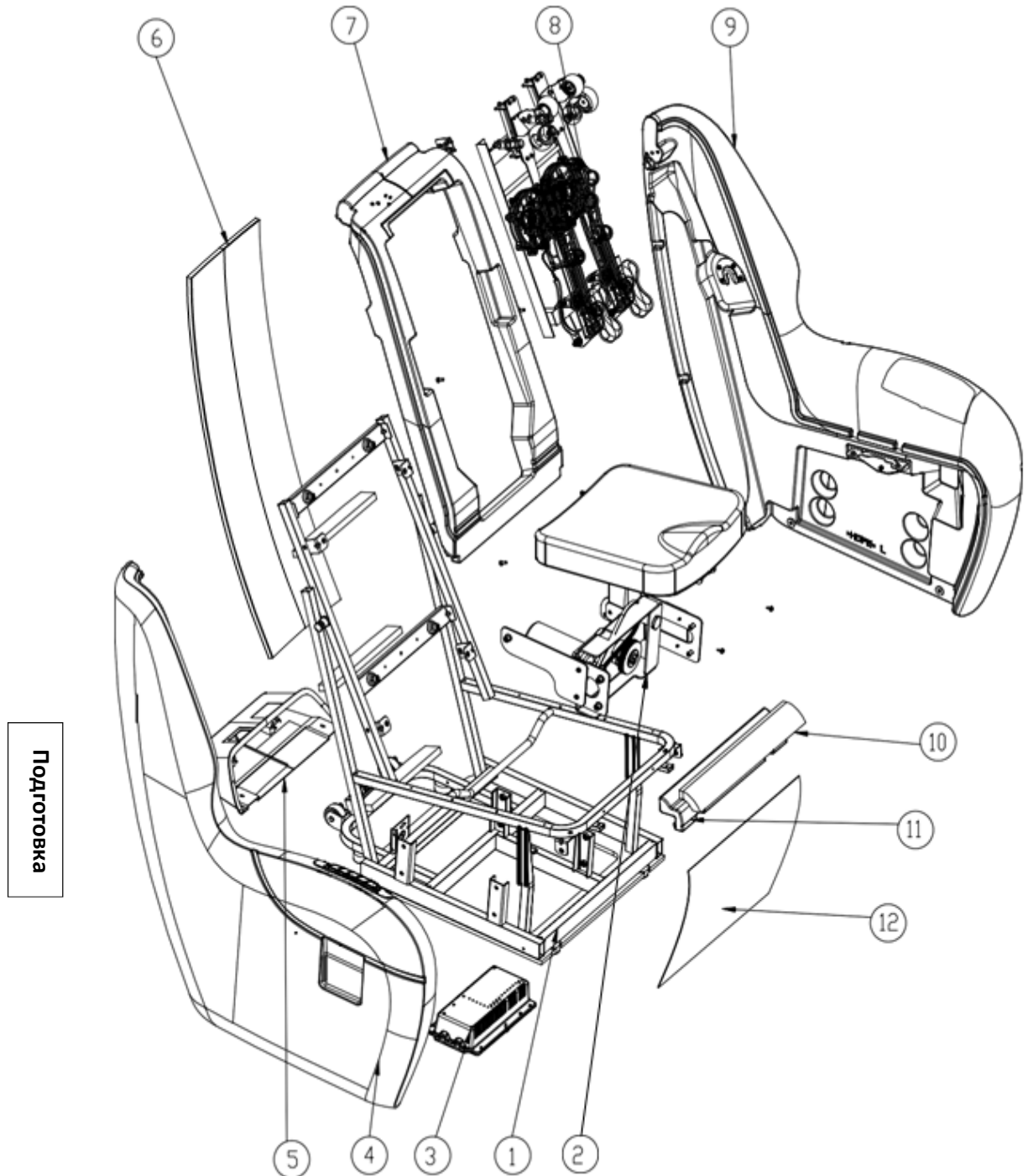



## Установка (1)

### Шаг 1. Достаньте основной корпус и другие элементы из картонной коробки.

- 1 Чтобы достать коробки с запасными частями и кресло из картонной коробки, нужно не менее 2 (двух) человек.
- 2 Проверьте наличие всех запасных частей.



Держитесь за нижнюю часть подлокотника и медленно перемещайте кресло.



Шнур питания

Установка

### Проверка пространства



Массажное кресло тяжелое, при продолжительном использовании оно может испортить ваше напольное покрытие. Постелите одеяло или другую мягкую ткань, чтобы защитить пол.

#### Внимание:

- Не используйте кресло во влажных помещениях: у бассейна, в ванной комнате во избежание попадания влаги и короткого замыкания.
- Установите кресло на ровной поверхности, во избежание падения, шума или других проблем во время использования.
- Не используйте кресло под прямыми солнечными лучами или при воздействии высоких температур, во избежание износа обивки.


## Установка (2)

### Шаг 2. Эксплуатация и размещение


1. Подключите шнур питания в выход питающего блока, как показано на рисунке справа.
2. Вставьте штекер шнура питания в розетку.
3. Нажмите на выключатель в задней части питающего блока. (Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ «O/I», нажмите вниз, чтобы включить устройство)
4. Используйте пульт управления, встроенный в подлокотник, для выбора функции массажа. Наслаждайтесь и расслабляйтесь благодаря комфортному массажу с помощью нашего устройства.
5. Во включенном состоянии можно использовать USB-порт в правом подлокотнике для зарядки ваших мобильных устройств. Не используйте мобильные устройства во время зарядки.



Убедитесь, что переключатель установлен в положение «ВЫКЛ», прежде чем отключать штекер шнура питания от розетки.

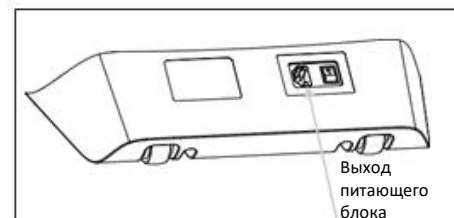

Подключите шнур питания в выход питающего блока

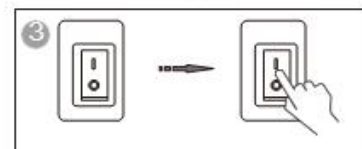

Установка





Пульт управления в подлокотнике

## Помещение

	<b>Внимание</b>
	Не используйте кресло во влажных помещениях: у бассейна, в ванной комнате во избежание протечки или удара током.
	Не используйте кресло под прямыми солнечными лучами или при воздействии высоких температур, во избежание износа обивки.
	Установите кресло на ровной поверхности, во избежание падения, шума или других проблем во время использования кресла.


Массаж

- **Проверка подключения кабеля и вилки**  
 (1) Всегда протирайте пыль с вилки сухой тканью.  
 (2) Не переламывайте, не ремонтируйте, не складывайте, не растягивайте, не завязывайте, не ставьте тяжелые предметы (особенно кресло) на шнур питания.

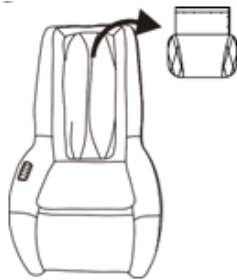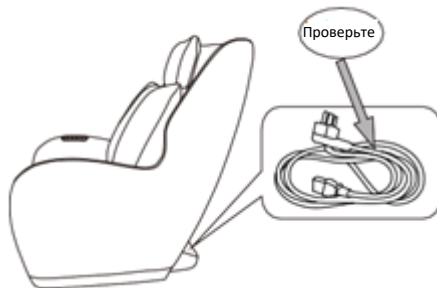


- **Совет:** если вам кажется, что массаж недостаточно сильный, вы можете убрать подушку и плечевую подушку.

- Массажное кресло тяжелое, при продолжительном использовании оно может испортить ваше напольное покрытие. Постелите одеяло или другую мягкую ткань, чтобы защитить пол.

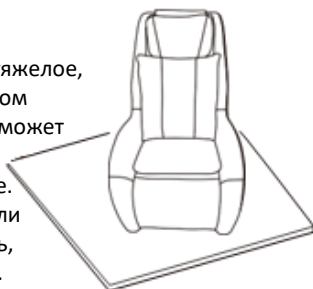

## Перемещение кресла

	<b>Внимание</b>
Не перемещайте кресло во время работы, во избежание несчастных случаев или повреждений	


## Перемещение

- Скрутите кабели и положите их в сидение, во избежание их повреждения при перемещении.
- Если вы уроните кресло, внутренние элементы могут повредиться.
- Не используйте нижний ролик на деревянном полу или полу из другого легко повреждаемого материала. Поднимать кресло должны двое взрослых людей.
- Убедитесь, что питание выключено, а вилка не касается пола (лучше перевести кресло в вертикальное положение, чтобы спинка не ударилась о пол)




## Нормальное перемещение


1. Надавите на подголовник, чтобы кресло встало на задние ролики. Затем толкайте кресло в желаемое место и медленно опустите.

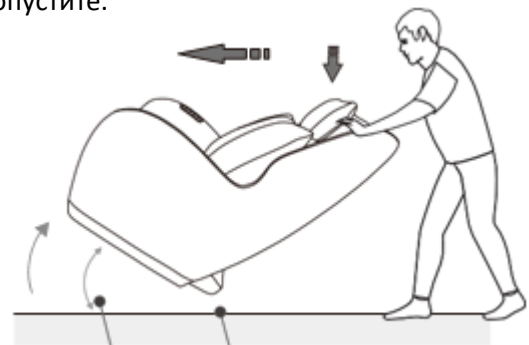






Не более 40 градусов — Ролик

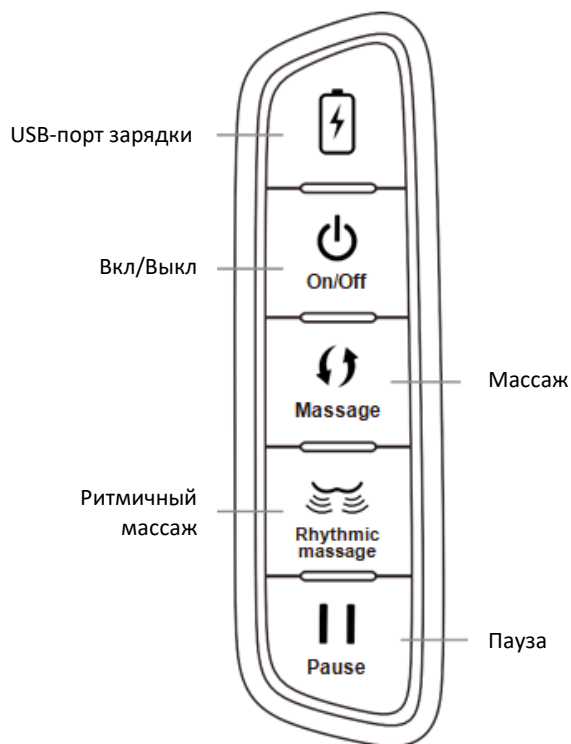-  Придерживайте опору для ног, чтобы переместить кресло (как показано на рисунке), чтобы избежать царапин на кожаной обивке.

## Ручное управление



Массаж

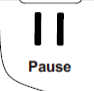	<p>1. Откройте эту крышку и подключите кабель зарядки мобильного устройства в USB-порт для зарядки мобильного устройства</p>
	<p>2. В режиме ожидания индикатор данной клавиши будет мигать. Нажмите на клавишу один раз, чтобы включить кресло. Индикатор всегда горит. Нажмите данную клавишу во включенном режиме, чтобы прекратить массаж и остановить работу устройства.</p>
	<p>3. Во включенном состоянии нажмите данную клавишу один раз, чтобы включить массажную функцию спинки. Индикатор загорится синим цветом. Если перед этим использовалась функция вибрации, она остановится, а индикатор вибрации потухнет. Нажмите клавишу второй раз, чтобы возобновить массаж. Индикатор загорится зеленым цветом. Нажмите клавишу третий раз, чтобы устройство перешло в режим двустороннего массажа, индикатор загорится красным цветом.</p>
	<p>4. Во включенном состоянии нажмите данную клавишу один раз, чтобы активировать низкий уровень вибрации, индикатор загорится синим цветом. Если перед этим была запущена функция массажа, она будет остановлена, а ее индикатор потухнет. Нажмите клавишу второй раз, чтобы включить средний уровень вибрации, индикатор загорится зеленым цветом. Нажмите клавишу третий раз, чтобы перейти к высокому уровню вибрации, индикатор загорится красным цветом. Нажмите клавишу четвертый раз, чтобы вернуться к среднему уровню вибрации, индикатор загорится зеленым цветом. Нажмите клавишу пятый раз, чтобы вернуться к низкому уровню вибрации, индикатор загорится синим цветом.</p>
	<p>Во включенном состоянии нажмите данную клавишу, чтобы приостановить массаж, индикатор загорится красным цветом. Нажмите клавишу второй раз, чтобы возобновить массаж, индикатор потухнет.</p>

## ВКЛ/ВЫКЛ



## Шаг 2. Массаж

1. Вставьте штекер шнура питания в отверстие «А».
2. Вставьте вилку в розетку.
3. Включите переключатель на блоке выключателя, массажное кресло включится.
4. Нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» на пульте дистанционного управления, который подаст одинзвучовой сигнал. После чего отобразится главный экран.


## Шаг 2. Массаж

Массаж

- 1 Управляйте тренажером в соответствии с инструкцией по эксплуатации пульта управления. Что касается методов массажа, см. раздел «Использование пульта».
- 2 По окончании массажа, массажное устройство вернется в положение по умолчанию.



Пульт дистанционного управления

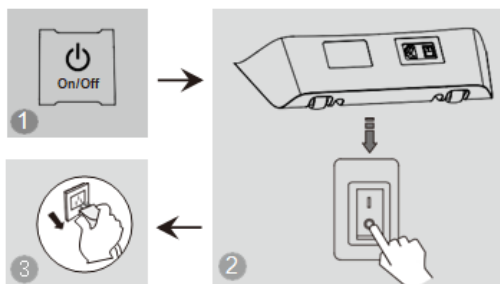

## Шаг 3. Выключение питания

- 1 Когда кресло включено, нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ для выключения массажного кресла. Оно автоматически вернется в изначальное положение.
- 2 Выключите переключатель в нижней части спинки кресла, после того как ролики вернуться в первоначальное положение.
- 3 Отключите вилку из розетки.



Меры предосторожности

1. Перед использованием поднимите подушку сидения и т.д., чтобы проверить, не поврежден ли пластик. При наличии повреждения прекратите использование, отключите кресло и обратитесь за ремонтом.
2. Подключайте кресло только в подходящую розетку.



Предупреждение

1. Перед посадкой убедитесь, что между подлокотниками, подножкой, спинкой и сидением кресла ничего не зажато.
2. Убедитесь, что перед использованием настройки кресла были сброшены.
3. Не стойте на кресле во время использования.



## Синтетическая кожа

### Общая очистка

Очищайте кресло чистой мягкой сухой тканью.



Не используйте растворитель, бензин, спирт и другие химикаты.



### Если испачкалась кожа

- 1 Обмакните мягкую ткань в 3-5% раствор нейтрального чистящего средства, выжмите, а затем мягко очистите пятна на поверхности кресла.
- 2 Прополощите ткань, выжмите и сотрите моющее средство с поверхности кресла.



- 3 Мягко очистите сухой тканью.
- 4 Дайте поверхности высохнуть (использование фена запрещается).

## Тканевые части

- 1 Обмакните мягкую ткань в нейтральное чистящее средство, выжмите, а затем мягко очистите тканевую поверхность кресла.

- Не используйте растворитель, бензин, спирт и другие химикаты.

- 2 Протрите загрязнения щеткой с нейтральным чистящим средством (избегайте чрезмерного давления)

\* Чрезмерное давление может привести к повреждению ткани.

- 3 Протрите влажной выжатой тканью.



## Пластиковые детали

- 1 Обмакните мягкую ткань в нейтральное чистящее средство, выжмите, а затем мягко очистите тканевую поверхность кресла.
- 2 Протрите влажной выжатой тканью.
- 3 Дайте высохнуть.



## Очистка пульта

- 1 Протрите мягкой выжатой тканью.
- 2 Дайте высохнуть.



Не используйте растворитель, бензин, спирт и другие химикаты.



Пульт дистанционного управления



### Про очистение

- Перед очищением отключите кресло от сети; не трогайте вилку мокрыми руками.
- Перед подключением вилки в розетку убедитесь, что у вас сухие руки.
- При несоблюдении вышеприведенных инструкций пользователь может получить удар электрическим током или ожог.

## Часто задаваемые вопросы и решение проблем

Проблема	Возможная причина	Решение
Массажное кресло не работает после включения питания.	Проверьте, включен ли переключатель.	Откройте пульт управления.
	Не выбран режим массажа.	Выберите режим массажа.
	Проверьте, плотно ли вилка вставлена в розетку.	Убедитесь, что вилка вставлена в розетку.
	Шнур или втулка повреждены.	Обратитесь к производителю или одобренному им технику для проверки или замены.
	Перегорел предохранитель.	Замените предохранитель на аналогичный.
	Неисправность в проводке.	Обратитесь к одобренному технику для проверки или замены
Во время работы кресло издает странные звуки.	Это звук воздушного насоса, двигателя или механических частей.	Это нормальный звук, не обращайтесь на него внимания.
Правый и левый ролик остановились на разной высоте.	Массажные ролики работают по очереди.	Это нормально, не обращайтесь внимания.
Звук во время работы внезапно становится громче.	Проверьте, не работает ли кресло слишком долго.	Отключите питание, чтобы массажное кресло отдохнуло в течение получаса перед следующим периодом работы.
	Внутренние детали стачиваются из-за продолжительной работы. Это нормально.	Обратитесь к одобренному технику для проверки и ремонта.
Массаж внезапно остановился во время работы.	Внезапное отключение.	Снова подключите питание.
	Время работы закончилось.	Отключите питание, чтобы массажное кресло отдохнуло в течение получаса перед следующим периодом работы.
Шнур питания или вилка нагреваются.	Возможна перегрузка устройства.	Отключите питание, чтобы массажное кресло отдохнуло в течение получаса перед следующим периодом работы.
	Другие неисправности.	Прекратите использование, обратитесь к одобренному технику за помощью.

Прочее



Примечание: если проблемы не вызваны ни одной из вышеприведенных причин, отключите переключатель и вилку из розетки, а затем свяжитесь с производителем или агентом по обслуживанию для ремонта кресла.

## Технические данные

Название	Умное массажное кресло	Мощность	120Вт
Модель	Fiji	Вес нетто/ Вес брутто	49,6кг / 61,4кг
Входящее напряжение	АС100-240В, 50/60Гц		
Класс безопасности	Класс I	Размер упаковки	1025x720x1045мм (ДxШxВ)

Прочее

Официальный дистрибьютор и импортер в России  
ООО «Оптима Импорт»  
Ул. Маршала Прошлякова д.30 офис 407  
+7 499 677-5632  
8-800-775-1217  
[www.wellfitness.ru](http://www.wellfitness.ru)  
[info@wellfitness.ru](mailto:info@wellfitness.ru)